GÖRÜNTÜLÜ/SESLİ INTERKOM(DAHİLİ HABERLEŞME) SİSTEMLERİ

- GÖRÜNTÜLÜ-SESLİ KAPI TELEFONLARI (AUDIO-VIDEO INTERCOM)
- SESLİ KAPI TELEFONLARI (AUDIO INTERCOM) / KAPALI DEVRE KONUŞMA CİHAZLARI
- TAMAMLAYICI ÜNİTELER VE AKSESUARLAR

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

Marka : **AIPHONE**

Üretici Firma : **AIPHONE CO., LTD.**
ADRES: 2-18 JINHO-CHO, ATSUTA-KU, NAGOYA, JAPAN
TEL: +81-52-682-5361
FAX: +81-52-682-3897
WEB: www.aiphone.com

Ithalatçı : NOVEL DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ.
Acıbadem Cad. No : 77/4 34718 Kadıköy – İSTANBUL
Tel: 0216-4280921 Pbx Fax :0216-4283343
e-mail : info@novel.com.tr

Merkez Servis İstasyonu : Acıbadem Cad. No : 77/4 34718 Kadıköy – İSTANBUL
Tel: 0216-4280921 Pbx Fax :0216-4283343
e-mail : info@novel.com.tr

Cihaz Kullanım Ömrü : 10 Yıl
Model /Tip :

NHX-50M	NH-1SA/A	NHR-3TS	NHR-4A/A
NHX-80X	NH-2SA/A	NHR-7A	NHR-SP
NHX-30G	NHR-30K	NHR-8B	

DİKKAT (Can/Mal Güvenliği içindir):

1. Bu cihazlar elektrikle çalışan cihazlar olup, kablajı ve/veya montajı satıcı firmanın yetkilendireceği ehliyetli kişilerce yapılmaldır.
2. Cihazlarda değişiklik ve modifikasyon yapmayınız/yaptırmayınız.Cihazların içlerini açmayınız, yüksek voltaj olabilir.
3. Cihazları su ve diğer sıvılardan uzak tutunuz, yangına veya elektrik şokuna sebep olabilir.

UYARILAR (Cihazınızın zarar görmemesi içindir)

1. Zil ayarını ahize yerindeyken yapın.
2. Cihazların montaj yerlerinden düşmemesine yerinin değitirilmemesine özen gösterin.
3. Dahili ortam cihazlarını aşağıdaki ortamlarda kullanmayın :


- Çok soğuk/ sıcak ortamlar (doğrudan güneş ışığı, klima önleri,soğutucu içi, vb.)
- Yüksek rutubetli ortamlar
- Tozlu,yağlı,kimyasal ve tuzların bulunduğu ortamlar
- Sürekli vibrasyon ve darbenin bulunduğu ortamlar

AIPHONE

HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ

NHX SİSTEM

Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

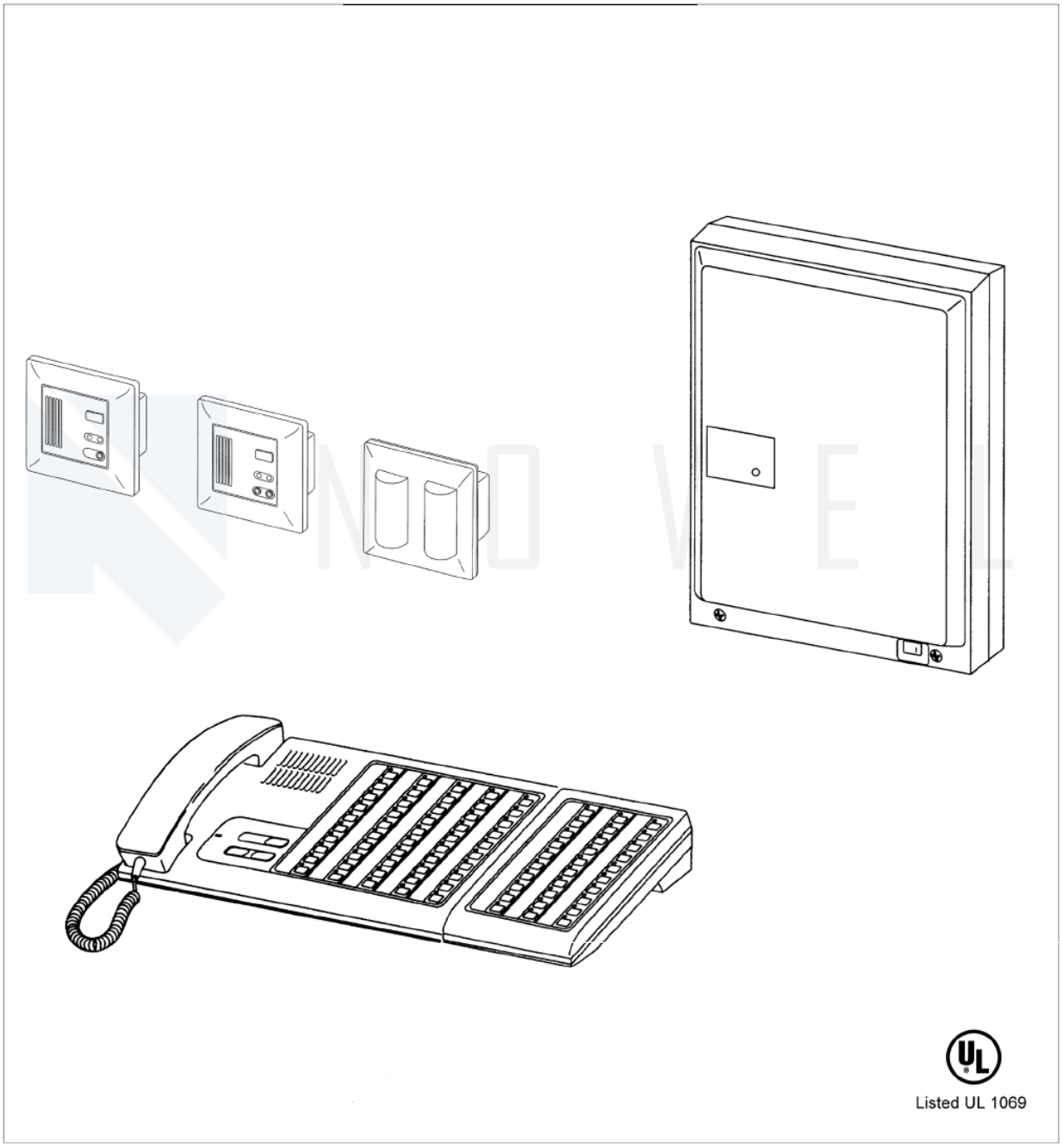


Listed UL 1069


1 SİSTEM ÇİZİMİ ve KOMPONENTLER

SİSTEM ÇİZİMİ


En uzak alt ünite max. 50mt. Toplam alt ünite hattı 100mt yi geçemez.

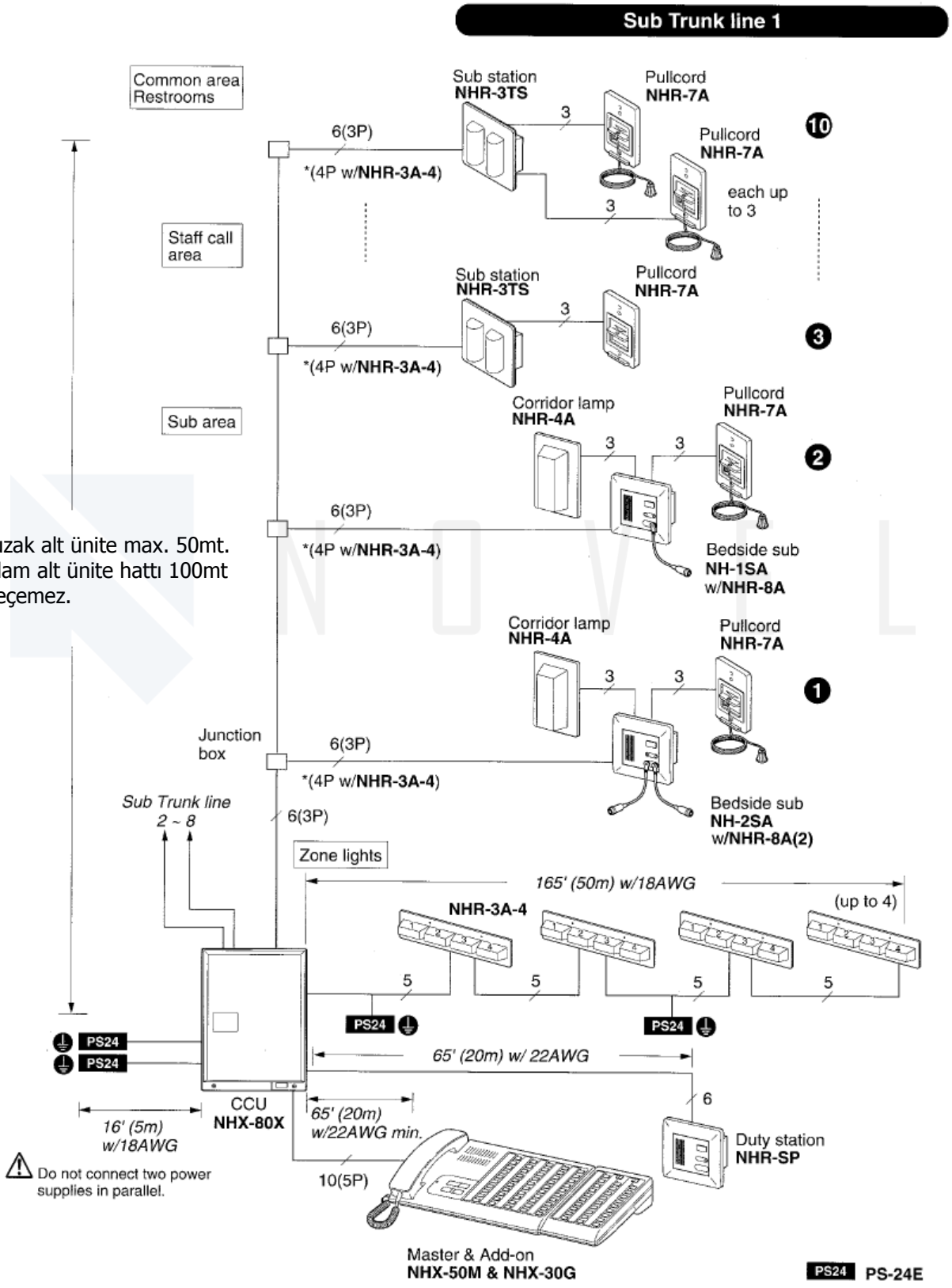

KOMPONENTLER

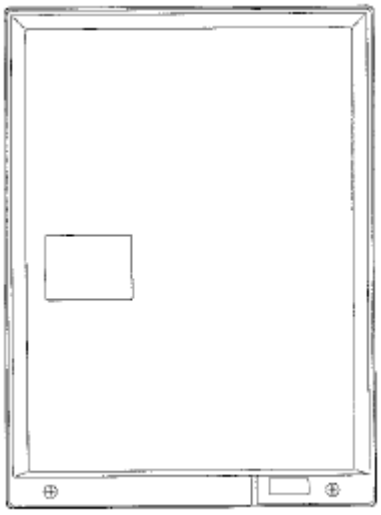

NHX-80X

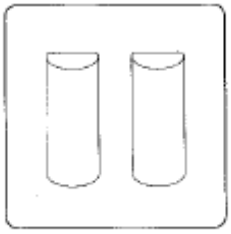


NHR-3TS




NH-1SA



NH-2SA

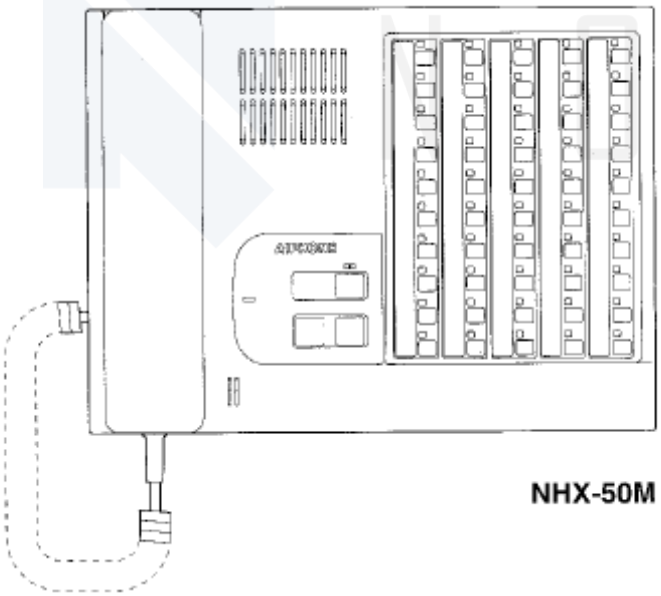

NHX-50M

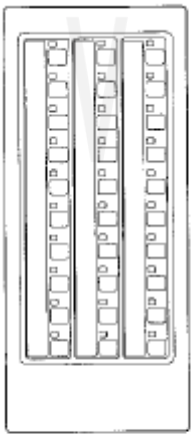


NHX-30G




NHR-SP


Merkezi Kontrol Ünitesi : NHX-80X
Merkez Ünite : NHX-50M
NHX-30G
Yardımcı Şube : NHR-SP
Yatakbaşı Ünitesi : NH-1SA
NH-2SA
Koridor Lambası : NHR-3TS


AKSESUARLAR

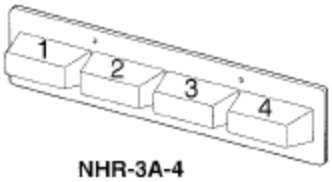

NHR-3A-4

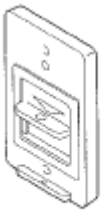
NHR-7A

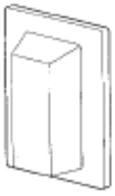

NHR-4A

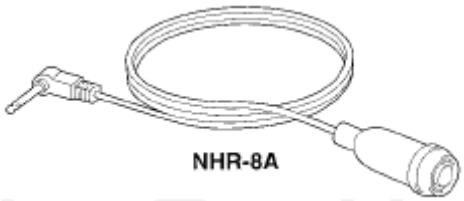

NHR-8A

Zon Lambası : NHR-3A-4
Acil Çağrı Ünitesi : NHR-7A
Yatakbaşı Butonu : NHR-8A
Koridor Lambası : NHR-4A


2 BAĞLANTI DİYAGRAMLARI


NHX-80X ile NHX-50M arası bağlantılar

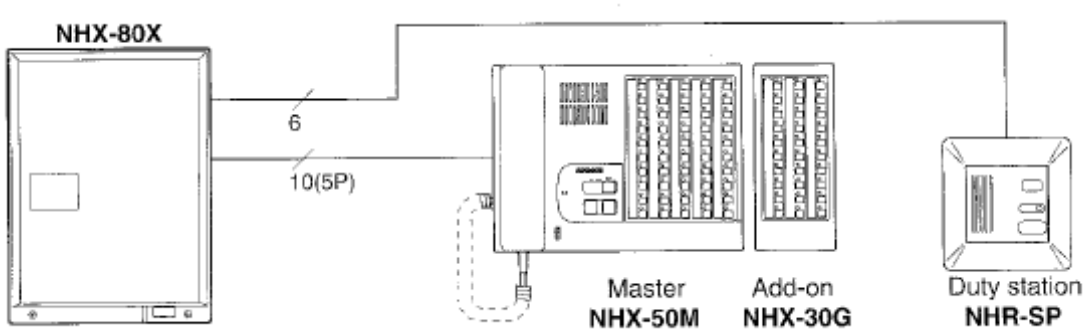

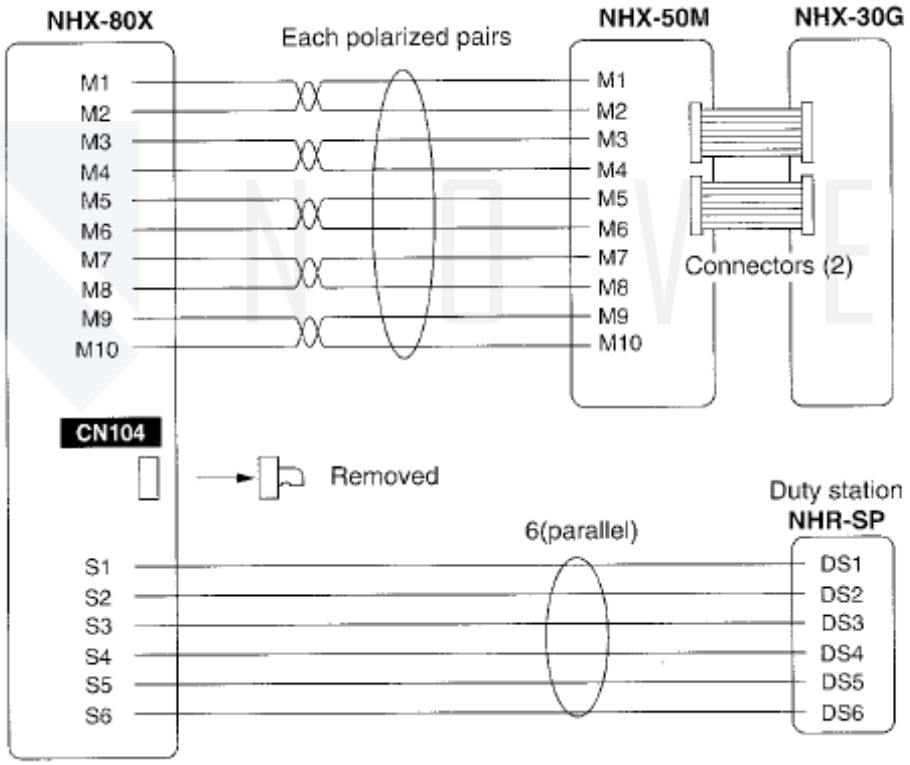

NHX-80X ile NH-1SA ve NH-2SA şubeler arası bağlantılar

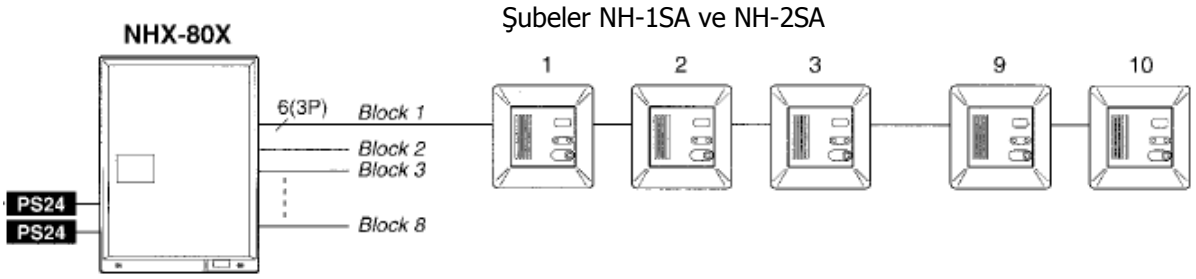

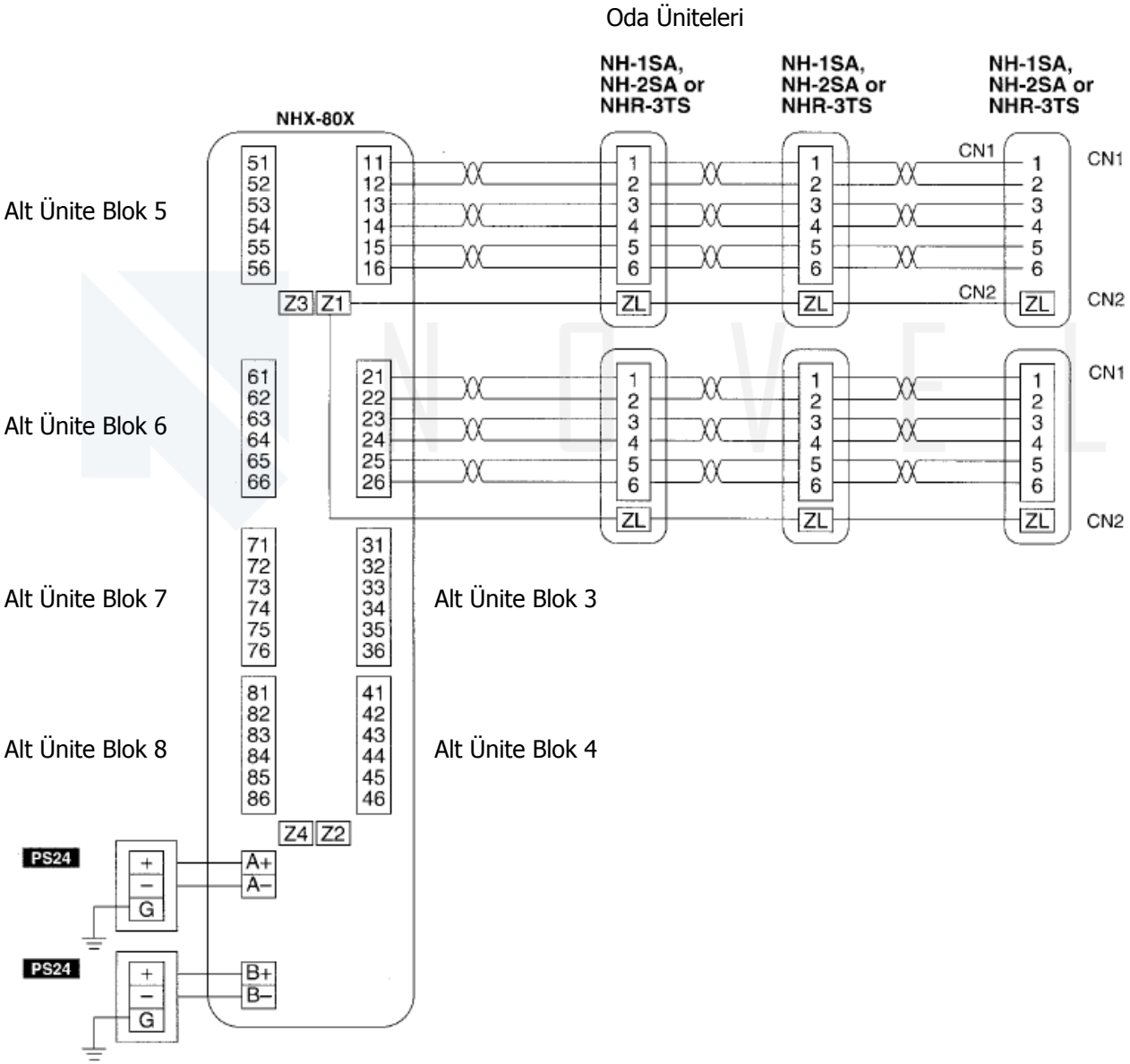

3 ÖZELLİKLER

Güç kaynağı : NHX-80X, DC 24V
Akım : Max. 4A
Ünite Kapasitesi : 50 Oda Ünitesi (NHX-50M), 30 Ek Oda Ünitesi (NHX-30G)
Konuşma Kanalı : Tek ve gizlilik

Kablo Mesafeleri

Merkez Kontrol Ünitesi ile en uzak Oda Ünitesi arası	50m
Merkez Kontrol Ünitesi ile NHX-50M arası	20m
Merkez Kontrol Ünitesi ile Yardımcı Şube arası	20m

NOVEL